

iHealth 在家测试说明书

February 2, 2022 2:55 PM SIMP CHINESE


在开始使用 之前了解重要信息

- 开始使用前仔细阅读所有说明。
- 您的测试盒也附有说明书。查看这些说明以获取更多信息。
- 如果您需要帮助, 请致电您的社区卫生部工作人员。
- 如果使用得当, 这个测试应该不会造成伤害。
- 一个测试盒只能使用一次。不要重复使用。
- 请勿用手触摸棉签尖端或卡片正面。
- 测试**前后**彻底洗手。



1. 准备材料

- 打开包装并取出
 - » 测试卡在小袋中
 - » 试管充满液体(浓缩缓冲液)
 - » 棉签包在装包中
- 将所有物品留在包装中, 直到需要才拿出来。
- 准备好后, 从袋中取出测试卡。将它放在您面前的平坦桌子或台面上。

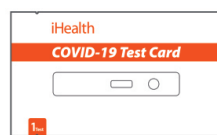

一张 COVID-19 测试卡





一根试管



一根棉签

2. 采集样本

- 从包装中取出棉签。**小心不要触摸尖端**。不要扔掉包装纸。
- 将棉签放在一个鼻孔中。不要插入太深, 仅插入1/2英寸(1.5公分)到3/4英寸(2公分)。
- 将棉签按在鼻孔内侧。慢慢地将棉签绕着鼻孔内擦一圈。
 - » 在鼻孔内侧慢慢转绕至少**5圈以上**。
 - » 这动作至少需要 **15 秒**。
 - » 转绕时棉签必须要牢牢擦鼻孔内侧, 全绕一圈
- 使用相同棉签并在另一个鼻孔中重复所有这些步骤。

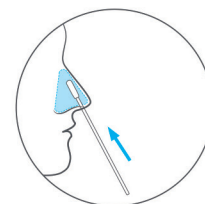
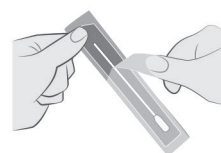


到3/4英寸




3. 采样过程

- 保持管子直立。在桌子上轻敲试管底部2至3次。
- 拧开橙色大盖子以打开管子。小心不要溅出任何液体。
- 将刚擦拭鼻孔的棉签插入试管中，**直至接触到试管底部**。
- 将棉签在试管中的液体中搅拌至少**15次**。
- 要把棉签从试管中拉出时，将试管的两侧挤压棉签。这会将一些液体从棉签尖端挤出。然后把棉签放回原来的包装中，就可把有棉签的包装扔掉。
- 将橙色盖子放回管上关紧。

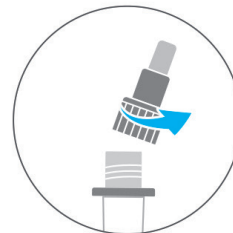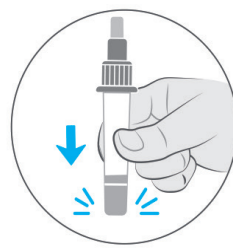


4. 加样本并等待

- 转动试管上白色小盖子，直到它脱落。
- 将试管翻转过来，**挤3滴**样本到测试卡上**较小的孔**中。
- 将白色的小盖放回试管上。与棉签包装，一起扔掉。
- 让卡片静置15分钟。不要触摸或移动它。

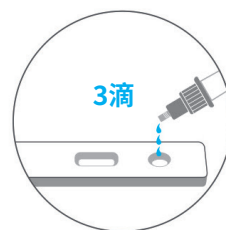

5. 读取结果

- 等待15分钟后，您就可以阅读您的测试结果。滴剂添加到卡片后，**您必须在15到30分钟之间**，阅读您的结果。务必不要**过30分钟**后才阅读结果。
- 如果您看到两条线，一条在“C”下方，一条在“T”下方，则您的测试结果为**阳性**。
 - » **仔细看!**“T”下方的线可能**非常微弱**。在“T”下看到的**任何线条**都表示您的测试是阳性的。
 - » 请参阅测试随附的说明，以视阳性测试的实际照片。
- 如果您只看到一条线（在“C”下方），那您的测试结果则为**阴性**。
- 如果您看到以下任何一种情况，则测试是**无效**：
 - » 没有线
 - » 只有“T”下方有线
- 如果您的测试无效，请进行另一次测试或致电您的社区卫生部工作人员

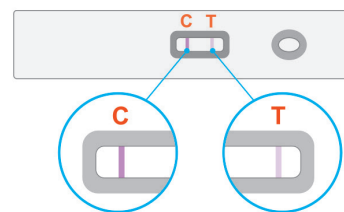

下一步

- 阅读讲义“如何处理阳性或阴性测试结果”
- 扔掉您的测试套件。
- 洗净你的手。

本说明书已简化。请查看测试套件盒随附的说明书，以获取完整说明。如果您有任何疑问，请咨询医疗专业人员。